


CORTADOR / DISPENSER DE BOBINAS MÉDICAS (CODIGO EF211 y EF212)

Descripción del Producto


Los dispensadores manuales Easyseal Código EF211 y EF212 están diseñados para el fraccionamiento rápido, preciso y seguro de rollos y mangas de empaque médico. Su innovador sistema de corte unimanual permite la tracción y el corte continuo de ida y vuelta sin soltar el material, duplicando la eficiencia de trabajo. Fabricados en perfiles de aleación de aluminio con cuchillas de acero de alta resistencia, garantizan cortes rectos, limpios y sin desgarros.

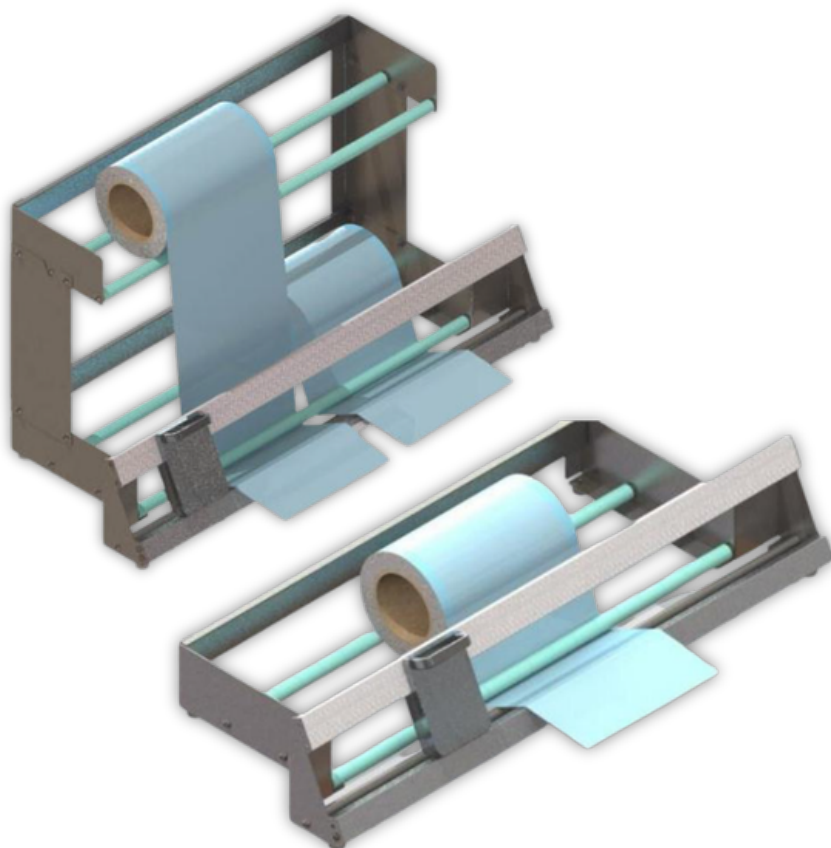



Características

- Operación Unimanual Continuada: Permite sostener, traccionar el empaque y accionar el carro de corte con una sola mano sin necesidad de soltar el material ni cambiar de agarre entre cortes, optimizando el tiempo del operario.
- Chasis Robusto y Ligero: Construcción en perfiles de aleación de aluminio de alta estabilidad.
- Cuchilla de Alta Precisión: Disco de acero de alta dureza para un corte rectilíneo y sin rebabas, con fácil remplazo de insumo.
- Diseño ergonómico que facilita la inserción y el paso de la tira de papel-plástico o Tyvek® a través de la guía de corte de forma rápida y sin trabas.
- Compatibilidad Multimaterial: Apto para bobinas planas y con fuelle de Papel-Plástico y Tyvek®.

Modelo: 212

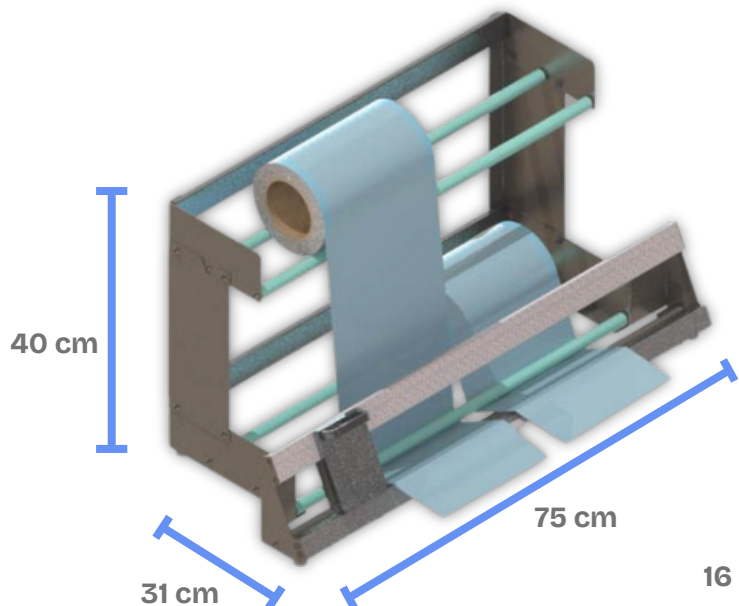

Modelo: 211

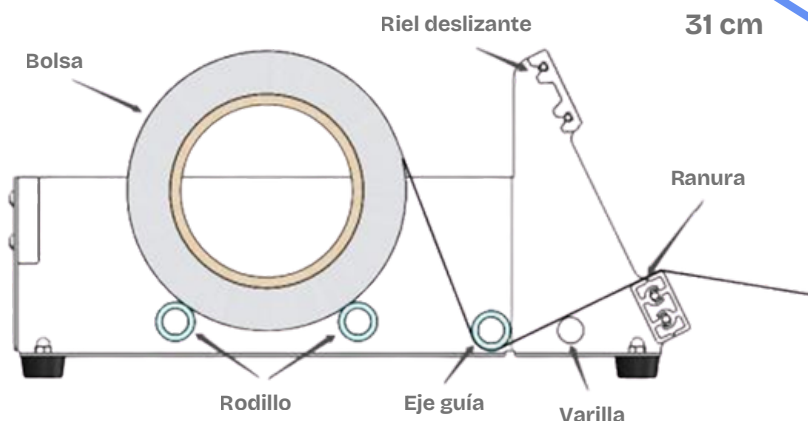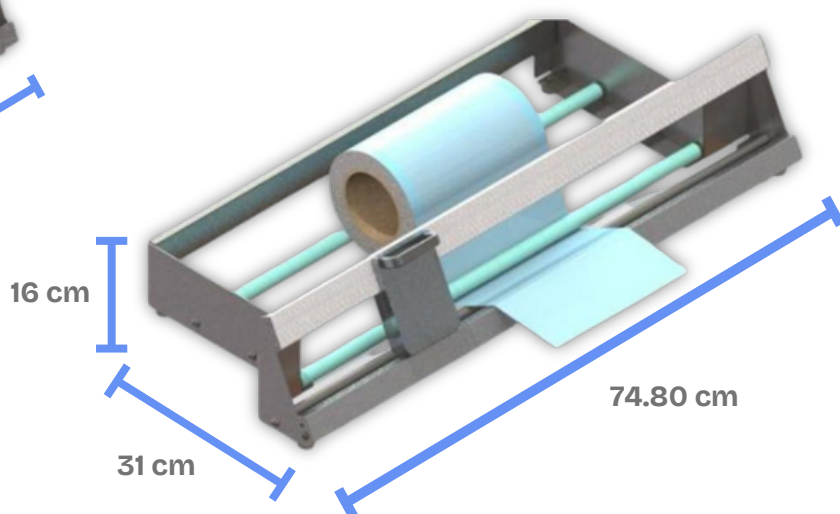

Modo de uso

- **Instalación:** Ubique el equipo sobre una superficie plana y cercana a la selladora.
- **Carga:** Coloque la bobina entre los rodillos e introduzca el extremo por el eje guía.
- **Corte:** Tire de la bobina hasta la medida deseada y deslice el carro de la cuchilla. Vuelva a tirar sin soltar el material y corte en sentido inverso para la siguiente unidad.

Rev01-02.09.26

   EFELAB SRL

 (+5411) 4623-3030 | 4624-2400 | 4747-0000

 (+54) 11-5977-6578 |  www.efelab.com |  info@efelab.com

Almacenamiento

Conservar en un entorno limpio y seco, protegido de la humedad y agentes corrosivos. Guardar en su empaque original ante traslados o periodos prolongados de inactividad.

Vida Útil

EFELAB SRL ofrece una garantía de 4 meses a partir de la fecha de factura, que cubre reparaciones gratuitas y reposición de piezas. (Las cuchillas son insumos consumibles y están excluidas de la garantía gratuita).

Se aplicarán tarifas de mantenimiento o se ofrecerá servicio técnico arancelado en los siguientes casos:

- Equipos fuera del período de garantía.
- Daños o deformaciones por factores externos o mal uso según el manual.
- Corte de materiales no aptos o uso de piezas no originales provistas por el fabricante.
- Desmontaje, modificación o reparación por parte de personal no autorizado.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese de inmediato con EFELAB SRL o un representante autorizado.


Precauciones

- Uso Exclusivo: Utilizar únicamente con bobinas de papel-plástico o Tyvek®. Cortar otros materiales (como cartón) dañará el filo.
- Manejo: Deslizar con presión uniforme sobre la guía sin aplicar fuerza lateral.
- Seguridad: No tocar la cuchilla directamente y estacionar el carro en un extremo al finalizar la jornada.

MEDICAL COIL CUTTER AND DISPENSER (CODE EF211 and EF212)

Product Overview


The Easyseal Codigo EF211 and EF212 manual dispensers are engineered for the rapid, accurate, and secure dispensing of medical packaging rolls and sleeves. Their innovative one-handed cutting mechanism facilitates continuous back-and-forth motion for cutting without the need to release the material, thereby enhancing work efficiency. Fabricated from aluminum alloy profiles and equipped with high-strength steel blades, they ensure straight, clean, and tear-free cuts.

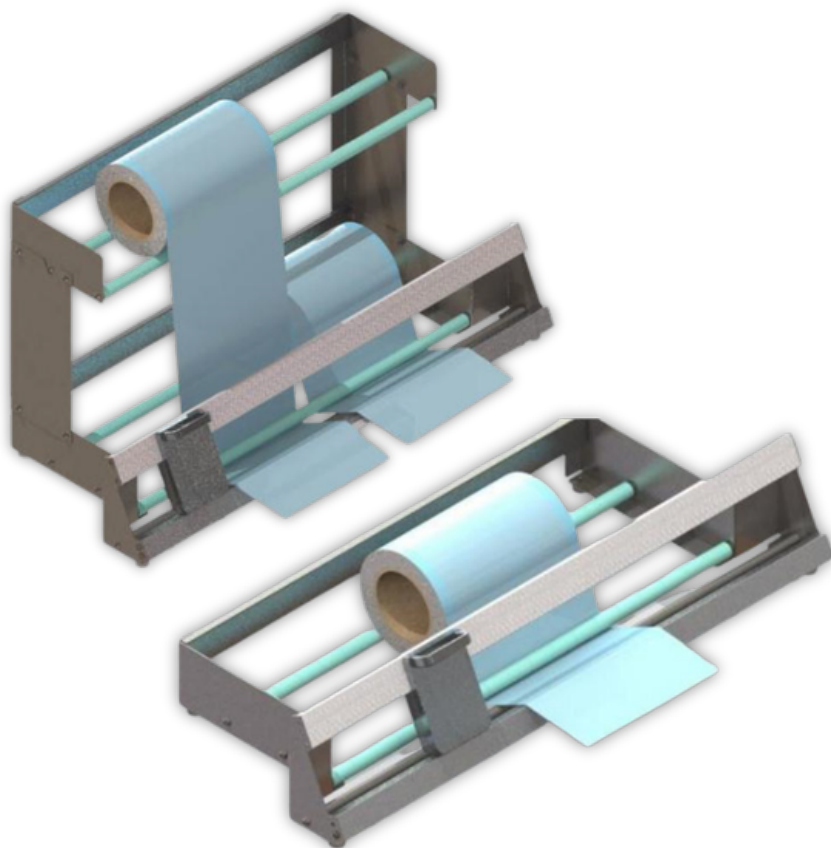



Features

- **Continuous One-Hand Operation:** Enables the user to hold and pull the packaging while simultaneously operating the cutting carriage with one hand, eliminating the need to release the material or adjust grip between cuts, thereby optimizing the operator's efficiency.
- **Robust and Lightweight Chassis:** Constructed from high-stability aluminum alloy profiles.
- **High Precision Blade:** A high-hardness steel disc designed for a straight, burr-free cut, facilitating the easy replacement of consumables.
- **An ergonomic design** that enables the swift and unobstructed insertion and passage of the paper-plastic or Tyvek® strip through the cutting guide.
- **Multi-material compatibility:** Appropriate for flat and gusseted rolls of Paper-Plastic and Tyvek®.

Model: 212

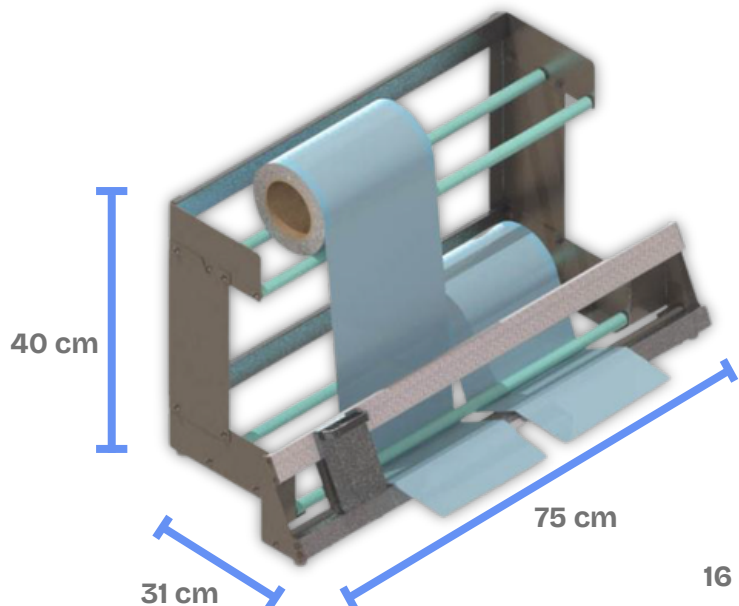

Model: 211

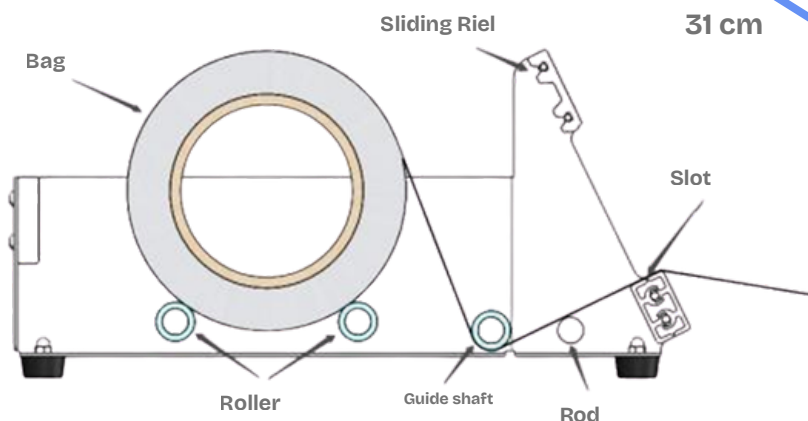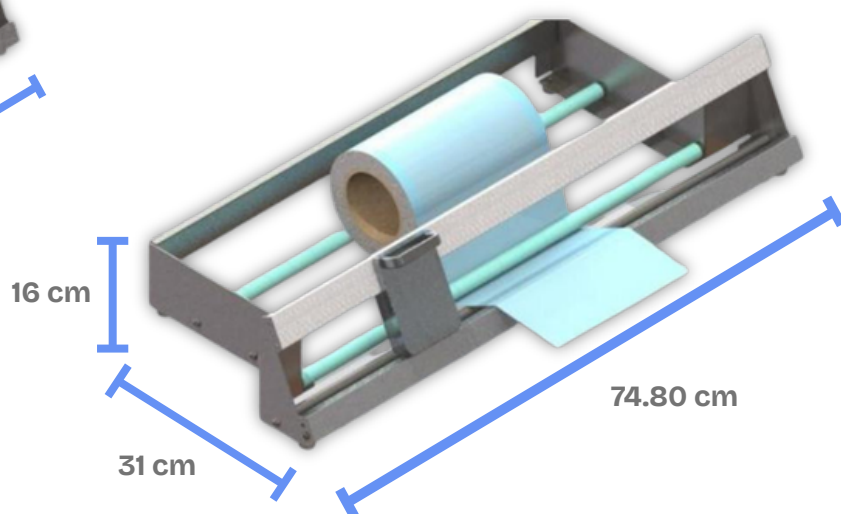

How to Utilize

Installation: Position the equipment on a level surface in proximity to the sealer.

Loading: Position the coil between the rollers and thread the end through the guide shaft.

Cutting: Extend the spool to the desired length and maneuver the blade carriage. Pull once more without releasing the material and cut in the opposite direction for the subsequent unit.

Storage

Store in a clean, dry environment, shielded from moisture and corrosive substances. Retain in its original packaging during transportation or extended periods of inactivity.

Useful Life

EFELAB SRL provides a four-month warranty from the date of the invoice, which includes complimentary repairs and replacement parts. (Please note that blades are considered consumable items and are not included in the complimentary warranty.) Maintenance fees will be applicable, or a fee-based technical service will be provided in the following circumstances:

Equipment beyond the warranty period.

Damage or deformation resulting from external factors or improper use as outlined in the manual.

Utilizing inappropriate materials or employing non-genuine components not supplied by the manufacturer.

Disassembly, modification, or repair by unapproved personnel.

In the event of any issues, please contact EFELAB SRL or an authorized representative without delay.

Precautions

Exclusive Use: Intended solely for paper-plastic or Tyvek® rolls. Cutting other materials, such as cardboard, will result in blade damage.


Handling: Glide with consistent pressure along the guide, avoiding lateral force.

Safety: Avoid direct contact with the blade and ensure the cart is parked at one end at the conclusion of the day.

Cortador/Dispensador de Bobina Médica (CÓDIGO EF211 e EF212)

Descrição do produto


Os dispensadores manuais Easyseal Código EF211 e EF212 foram concebidos para a dispensação rápida, precisa e segura de bobinas e mangas de embalagens médicas. O seu inovador sistema de corte com uma só mão permite tração e corte contínuos de vaivém sem libertar o material, duplicando a eficiência do trabalho. Construídos com perfis de liga de alumínio e lâminas de aço de alta resistência, asseguram cortes retos, limpos e sem rasgos.

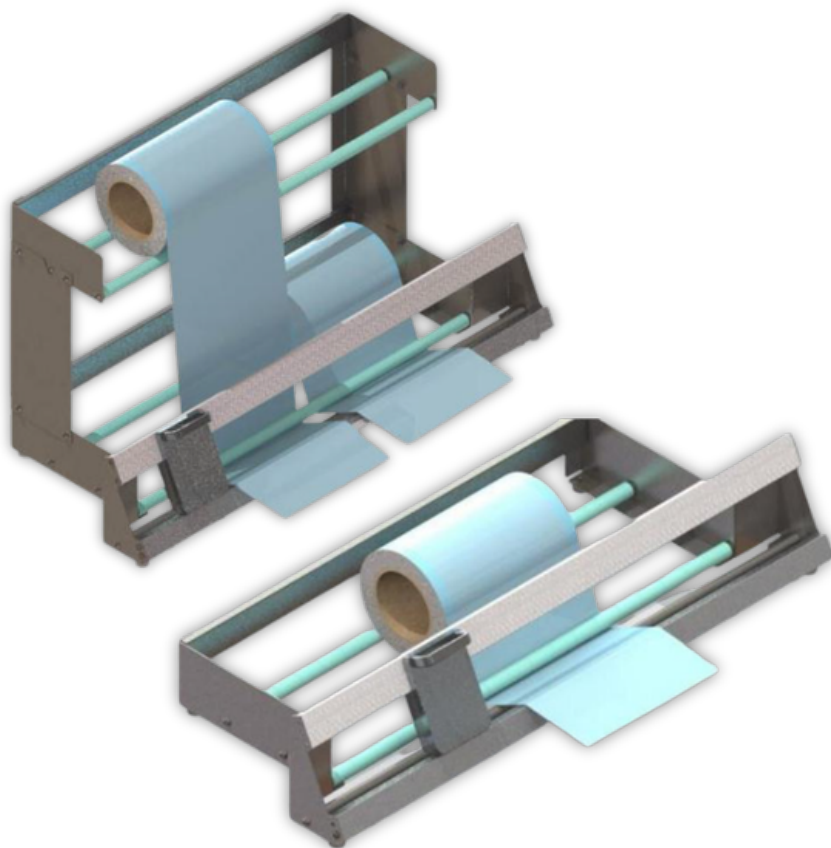



Características

- Operação contínua com uma única mão: Permite segurar, puxar a embalagem e operar o carro de corte com uma única mão, sem necessidade de soltar o material ou alterar a pegada entre os cortes, otimizando o tempo do operador.
- Chassi resistente e leve: Construção em perfis de liga de alumínio de elevada estabilidade.
- Lâmina de Alta Precisão: Disco de aço de elevada dureza para um corte reto e sem rebarbas, com fácil substituição de consumíveis.
- Design ergonómico que facilita a inserção e a passagem da tira de papel-plástico ou Tyvek® através do guia de corte de forma rápida e sem obstruções.
- Compatibilidade com diversos materiais: Adequado para bobinas planas e com reforço lateral de papel-plástico e Tyvek®.

Modelo: 212

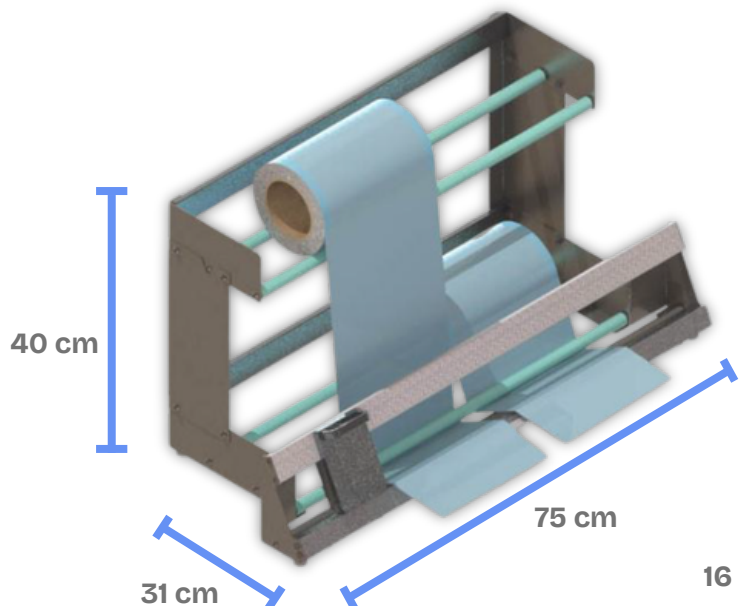

Modelo: 211

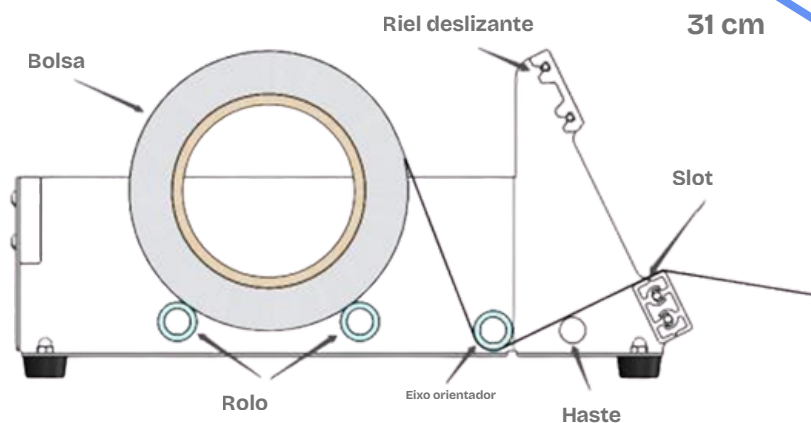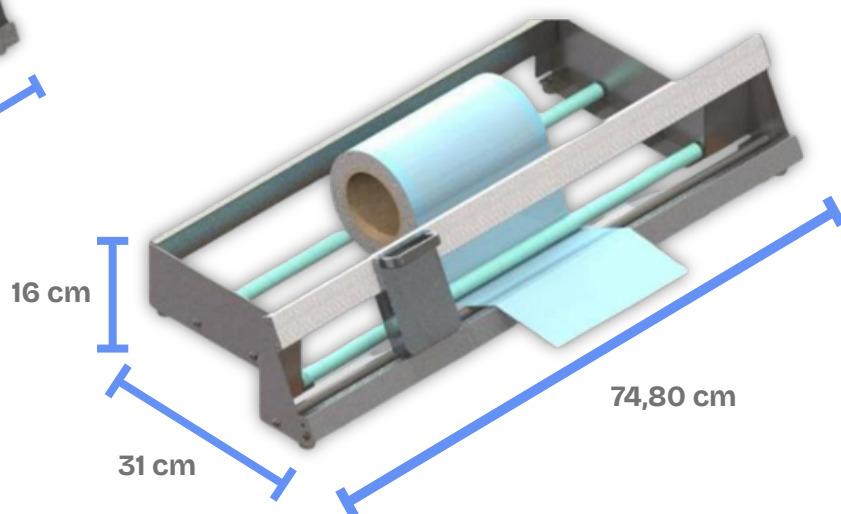

Como utilizar

Instalação: Posicione o equipamento sobre uma superfície plana, próximo à seladora.

Carregamento: Posicione a bobina entre os roletes e introduza a extremidade pelo eixo guia.

Corte: Puxe o carretel até ao comprimento desejado e deslize o carro da lâmina. Puxe novamente sem soltar o material e corte na direção oposta para a próxima unidade.

Armazenar

Armazene em local limpo e seco, protegido da humidade e de agentes corrosivos. Mantenha na embalagem original durante o transporte ou períodos prolongados de inatividade.

Vida Útil

A EFELAB SRL proporciona uma garantia de 4 meses a contar da data da fatura, que abrange reparações e peças de substituição sem custos. (As lâminas são consideradas itens consumíveis e estão excluídas da garantia gratuita). Serão aplicadas taxas de manutenção ou será disponibilizado um serviço técnico pago nas seguintes situações:

Equipamento fora do prazo de garantia.

Danos ou deformações resultantes de fatores externos ou uso inadequado, conforme indicado no manual.

Cortar materiais inadequados ou utilizar componentes não originais não fornecidos pelo fabricante.

Desmontagem, modificação ou reparação por pessoal não autorizado.

Em caso de qualquer problema, entre em contacto imediatamente com a EFELAB SRL ou com um representante autorizado.

Precauções

Uso exclusivo: Utilize apenas com rolos de papel-plástico ou Tyvek®. Cortar outros materiais (como papelão) danificará a lâmina.

Manuseio: Deslize com pressão constante na guia, evitando a aplicação de força lateral.

Segurança: Evite o contato direto com a lâmina e estacione o carrinho em uma das extremidades ao final do dia.