





SAFE / RECHAZADO

 **CHEMGRATOR**

Indicador de Esterilización para Peróxido de Hidrógeno (VH2O2)

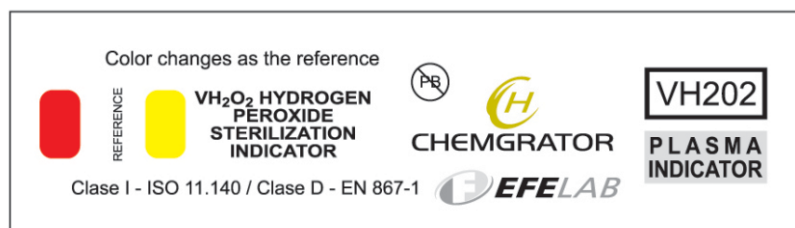

Antes de la exposición

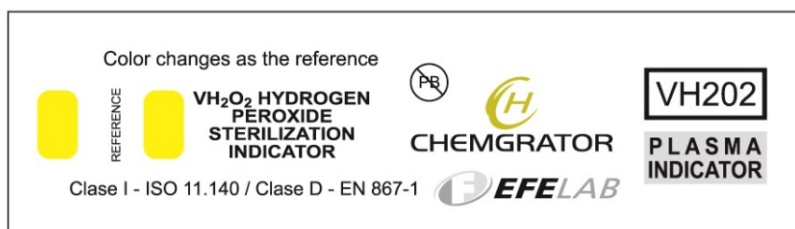

Después de la exposición

Los indicadores CHEMGRATOR están diseñados para ser utilizados dentro de los paquetes o lugares específicos dentro del equipo de esterilización donde al agente esterilizante no puede acceder fácilmente. El cambio de color del indicador se produce solo en presencia de los parámetros críticos del ciclo de esterilización por plasma de Peróxido de Hidrógeno.

Características principales de los indicadores CHEMGRATOR para VH2O2:

Indicador reactivo de alta fidelidad que cumple con los requerimientos de las normas ISO 11140-1 y EN 867.

El indicador cambia de color rojo a amarillo y el color final ha sido impreso en cada indicador para una interpretación inmediata de los resultados del ciclo.

El cambio de color es irreversible, pudiéndose utilizarse como registro del ciclo de esterilización.

Para ser utilizado en cualquier tipo de esterilizador por Peróxido de Hidrógeno.