




Indicador para esterilización en etiqueta autoadhesiva circular (Dot Label)

Las etiquetas autoadhesivas con indicador químico de esterilización se utilizan para identificar diferentes paquetes o materiales que serán expuestos a un proceso de esterilización. Muestran un cambio de color notorio y definido luego de ser procesadas bajo condiciones adecuadas de esterilización. Este modelo circular también admite la posibilidad de utilizar una maquina etiquetadora para aplicar cada etiqueta lo hace un método rápido y sencillo para identificar materiales.

Código / Catalogo No.	Medida	Para esterilización por:
2001	15 mm	Oxido de Etileno

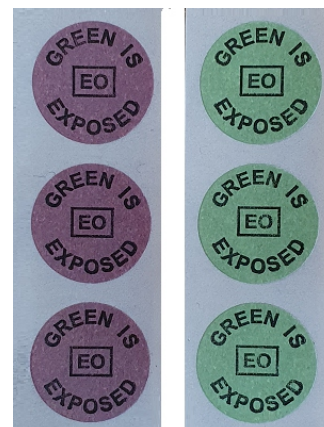

Antes



Después

Principales Características:

- ◆ Papel adhesivo que proporciona buena adhesividad aun a altas temperaturas.
- ◆ Tintas indicadoras de esterilización de gran fidelidad. Cumple con ISO 11140 / Tipo I
- ◆ Cada etiqueta lleva impresa el tipo de proceso de esterilización para la cual fue diseñada y el color al que vira.
- ◆ Posibilidad de utilizar maquina etiquetadora que facilita y acelera la aplicación del indicador sobre los envoltorios.
- ◆ Rollo por 1000 etiquetas autoadhesivas.