



# CHEMGRATOR

## Integrador para Calor Húmedo / Vapor


Ref.: 134 ° C

Ref.: 121 ° C



0 Minutos

0 Minutos

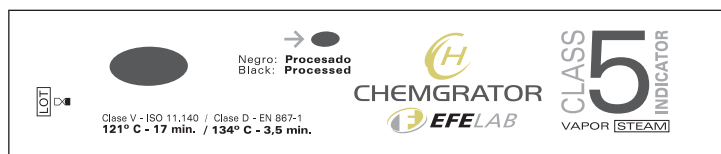

3.5 Minutos

17.5 Minutos

Los indicadores CHEMGRATOR están especialmente diseñados para integrar los efectos de tiempo, temperatura y vapor saturado en los procesos de esterilización.

El cambio de color del integrador solo se produce en presencia de estas tres condiciones, brindando evidencia visual inmediata si las condiciones necesarias de esterilización han sido alcanzadas durante el ciclo. Esto puede apreciarse mediante el cambio de color del testigo hasta su color de referencia

**Características principales de los integradores para calor húmedo CHEMGRATOR:**

Indicador reactivo de alta fidelidad que cumple con los requerimientos para la Clase 5 de las normas ISO 11140-1, EN 867 e IRAM-37101-1.

El integrador cambia de verde a negro y el color final ha sido impreso en cada integrador para una interpretación inmediata de los resultados del ciclo.

El cambio de color es irreversible, pudiéndose utilizarse como registro del ciclo de esterilización.

Adecuado para ciclos de calor húmedo / vapor con secado y ciclos flash.

Para ser utilizado en autoclaves de vapor a 121° C -17 minutos o a 134° C-3,5 minutos.

Vida útil del Producto : 60 meses desde su fecha de fabricación.