




Blue Peel

STERILIZATION PACKAGING

Bobinas Pelables tipo Pouch

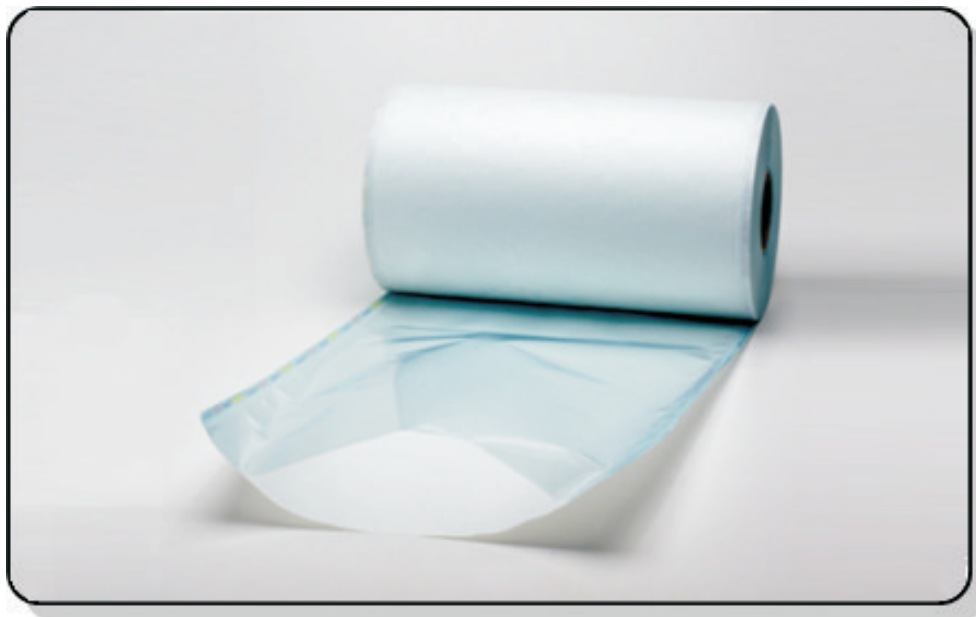

Elaborados con papel uso médico de 60 GR/M2, desarrollado especialmente para la confección de bobinas pelables según norma europea EN 868-1, y film bilaminado transparente con tonalidad azul y barrera antibacteriana. Este conjunto brinda óptima resistencia, durabilidad y pelabilidad.

- ◆ Indicador químico incorporado para los procesos de Calor Húmedo/Vapor y Oxido de Etileno (EO).
- ◆ Fácil visualización de los contenidos a través del film bilaminado.
- ◆ Presentación: con y sin fuelle. Bobinas de 100 y 200 MT de largo; 5,7,10,15,20,25,30, y 40 Cm ancho.
- ◆ Fabricados según Normas UNE-EN 868 Parte 5 de la CE.

Características del papel de uso medico utilizado en las bobinas Blue Peel.

- ◆ Elaborado con celulosa pura, libre de cloro elemental y de blanqueadores ópticos, es amigable con el medio ambiente.
- ◆ Cumple con la estricta normativa de calidad de la CE: EN 868 (partes 1,2,3,4 y 6) – específicas para papeles de uso médico-
- ◆ Alta barrera antibacteriana: brinda mayor seguridad frente a la contaminación del envase.
- ◆ Alta resistencia mecánica: otorga mayor seguridad con materiales con bordes agudos u objetos pesados.
- ◆ Tamaño de poro controlado: condición necesaria para el mantenimiento estéril del contenido del envase.
- ◆ Resistencia elevada contra líquidos. Mayor seguridad contra la contaminación
- ◆ Calidad superior de sellado/pelabilidad.