




Integrador Multiparametro para oxido de Etileno

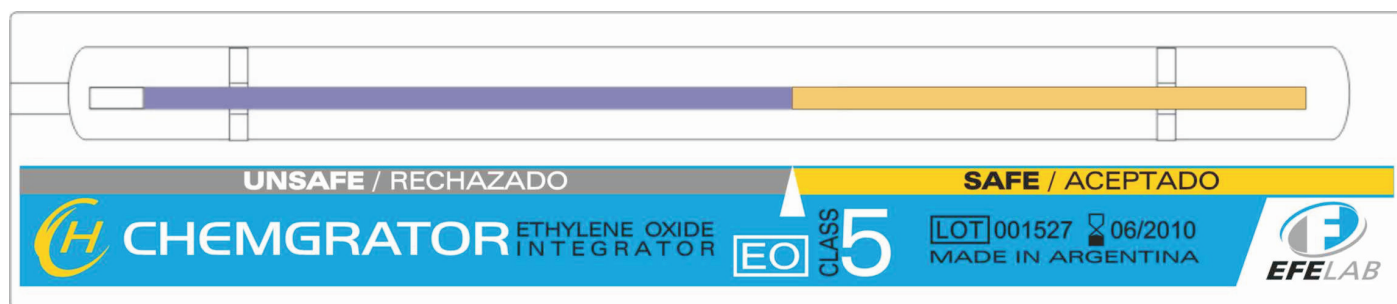

Los indicadores CHEMGRATOR están especialmente diseñados para integrar los efectos de tiempo, temperatura y concentración de Oxido de Etileno en los procesos de esterilización. El color amarillo del indicador se torna azul en presencia de estas tres condiciones y avanza progresivamente brindando evidencia visual inmediata si las condiciones necesarias de esterilización han alcanzadas durante el ciclo.

El puntero indicador marca el límite inferior de aceptación donde los parámetros críticos del ciclo de esterilización son alcanzados, pudiendo apreciarse fácilmente mediante el cambio de color del integrador hasta punto de referencia. El punto de referencia elegido - donde marca el puntero- representa el equivalente al punto de muerte de una población de esporas *Bacillus Subtilis* 1×10^6

Características principales de los integradores multiparámetro CHEMGRATOR:

- ◆ Permiten leer los resultados inmediatamente luego de efectuar el ciclo de esterilización.
- ◆ No requieren cultivo de laboratorio.
- ◆ Son prácticos y fáciles de utilizar.
- ◆ Son confiables.
- ◆ Optima calidad. Cumplen con los requisitos de la norma ISO 11140-1, Clase V.