





Indicador Multiparametro para Formaldehído

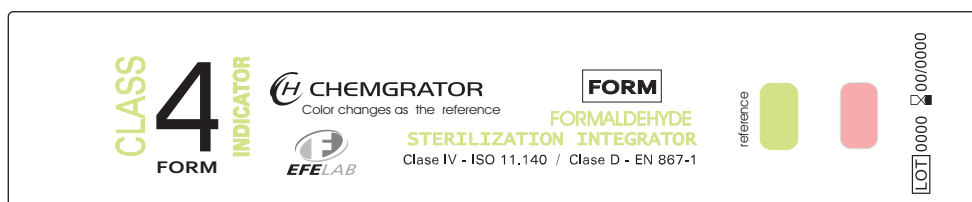

Antes de la exposición

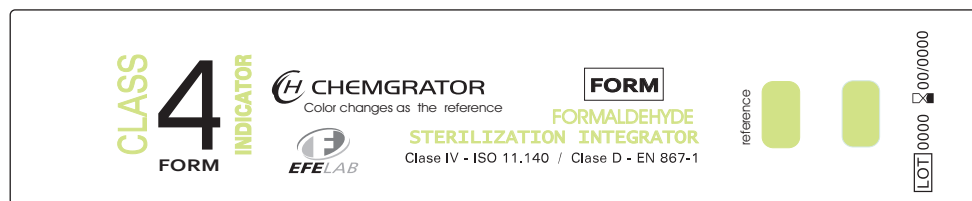

Después de la exposición

Los indicadores multiparametro CHEMGRATOR están diseñados para ser utilizados dentro de los paquetes o lugares específicos dentro del equipo de esterilización donde al agente esterilizante no puede acceder fácilmente. .
El cambio de color del indicador multiparametro se produce solo en presencia de los parámetros críticos del ciclo de esterilización por Formaldehído.

Características principales de los indicadores multiparametro CHEMGRATOR:

Indicador reactivo de alta fidelidad que cumple con los requerimientos para la Clase 4 de las normas ISO 11140-1, EN 867 e IRAM-37101-1.

El indicador cambia de rosa a verde y el color final ha sido impreso en cada indicador para una interpretación inmediata de los resultados del ciclo.

El cambio de color es irreversible, pudiéndose utilizarse como registro del ciclo de esterilización..

Para ser utilizado en cualquier tipo de esterilizador por Formaldehído.